

# HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



## Tipischaukel

Maximallast 150 kg

*Damit's sicher ist!*

### HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund


☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

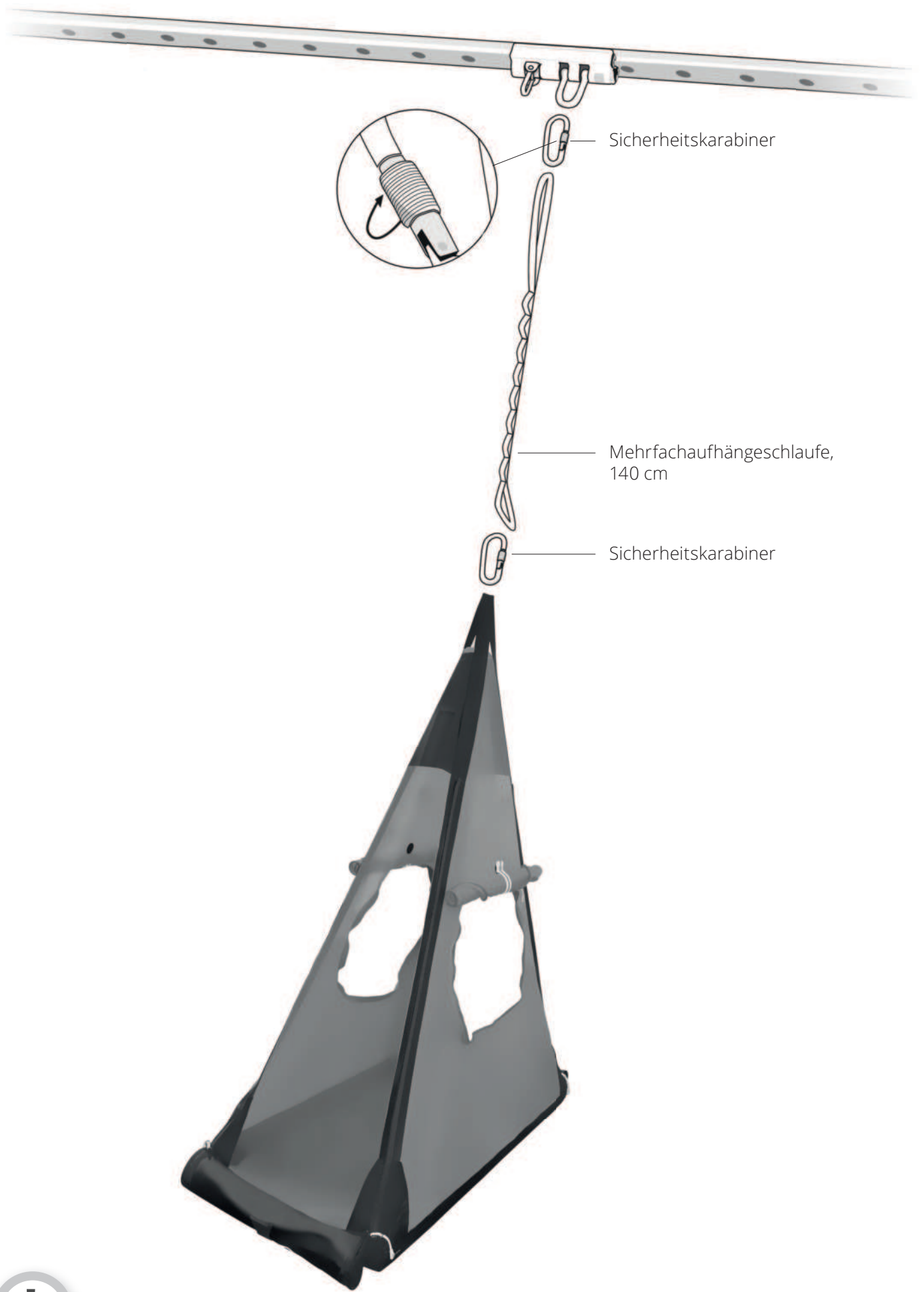

Sicherheitskarabiner

Mehrfachaufhängeschlaufe,  
140 cm

Sicherheitskarabiner



**Sicherheitshinweis:**

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

# Herstellerinformation

## Tipischaukel

**Hersteller:**  
HAIDIG® OHG  
Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

**Artikelnummer:** 1115020

### Sicherheitshinweise:

**Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.**

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

<b>Maximallast</b>	150 kg
<b>Größe</b>	ca. 120 x 60 x 150 cm
<b>Eigengewicht</b>	ca. 12 kg
<b>Material</b>	Cordura, Netzgewebe, Polypropylengurtband Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
<b>Zubehör</b>	inkl. 2 Sicherheitskarabiner, 1 Mehrfachaufhängeschlaufe 140 cm

### Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

### Anwendungsmöglichkeiten:

Die Tipischaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **einem** Punkt aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

### Beurteilungskriterien:

- Fördert Gleichgewichts-, Simulations- und Tiefensensibilität (aufgrund eingeschränkter visueller Wahrnehmung)
- Fördert das Rhythmusgefühl, Stärkung der Muskulatur
- Erweiterung der Handlungsplanung
- Auch für den U3-Bereich


### Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

# Anwendungsbeispiele



## 1. Aufbau einer Bewegungslandschaft

- 2 Seiten sind komplett geöffnet und an diese Seiten werden 2 Turnbänke platziert

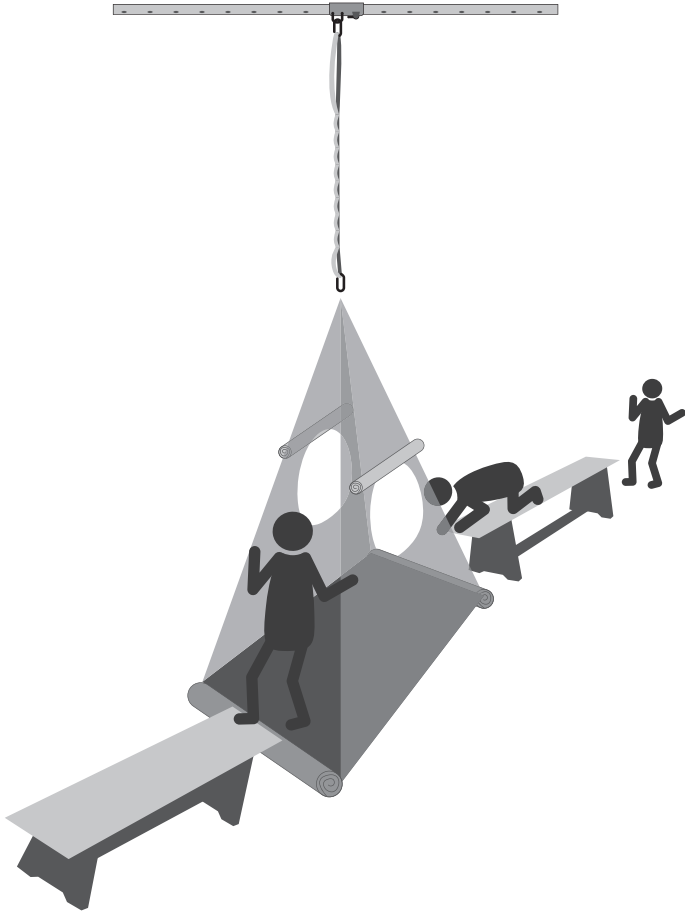

## Rückzugsmöglichkeit

- bis zu 2 Kinder können ungestört spielen (Schutzraumcharakter)
- Sichtkontrolle durch Material in Netzstruktur

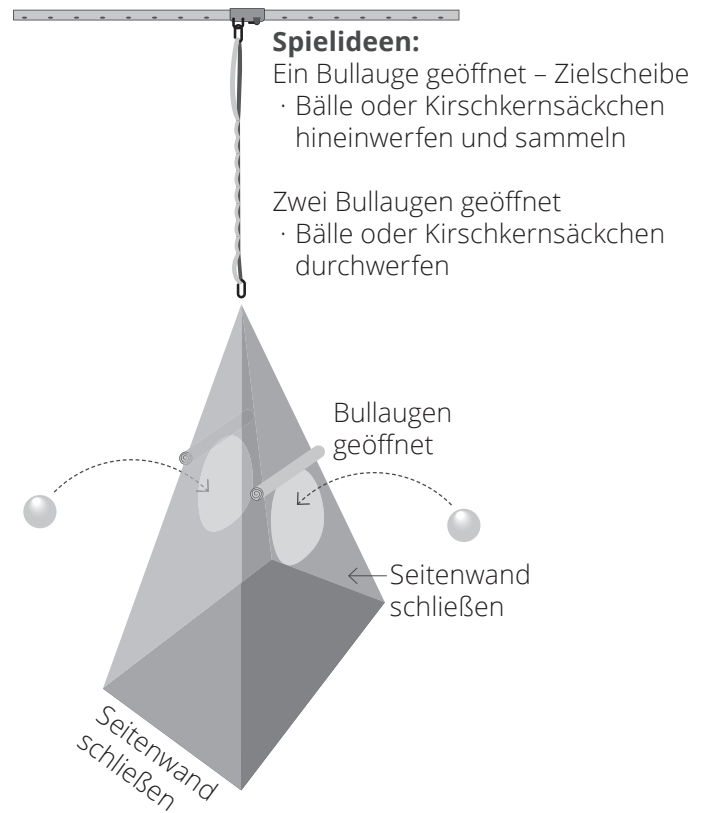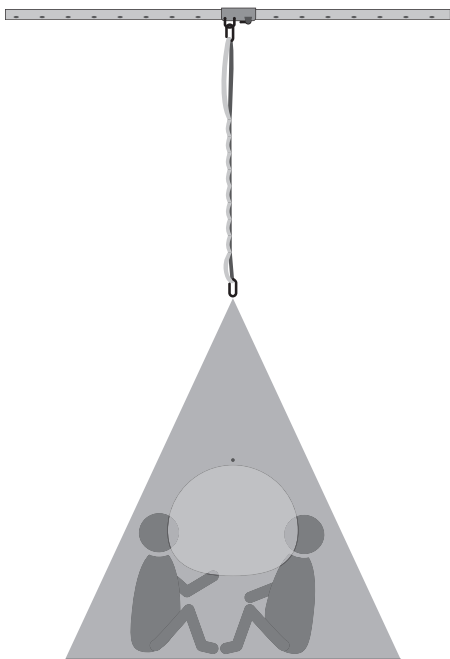

## Spielideen:

- Ein Bullauge geöffnet – Zielscheibe
- Bälle oder Kirschkernsäckchen hineinwerfen und sammeln

- Zwei Bullaugen geöffnet
- Bälle oder Kirschkernsäckchen durchwerfen