


HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen

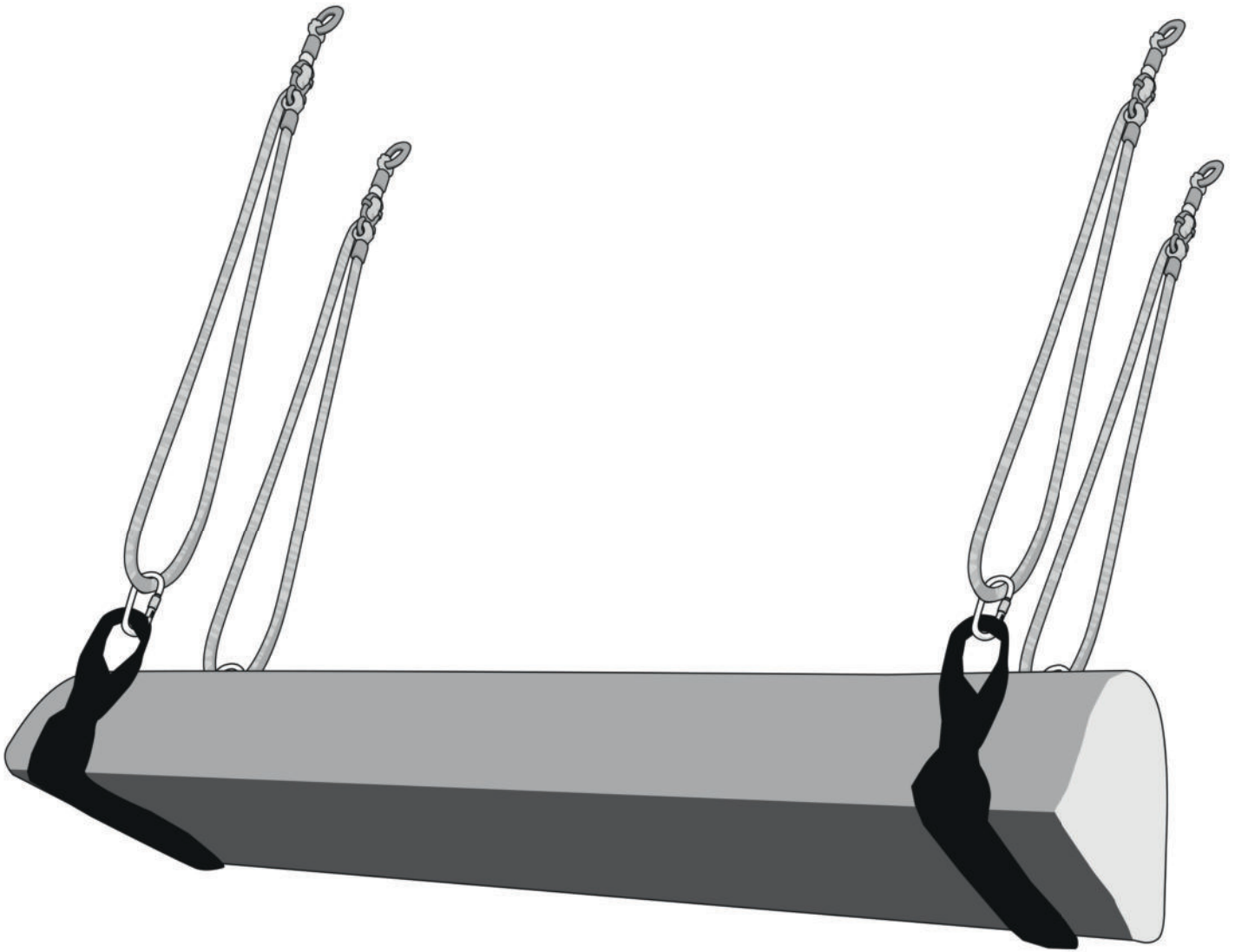

Halbrundschaukel

Maximallast 150 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG OHG

🏠 Oberste-Wilms-Straße 23 – 44309 Dortmund

☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157



@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de

🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

**Sonderzubehör (8-tlg.)
separat erhältlich
Art.-Nr.: 118500**

- 2 Pendelhölzer
(Länge 62 cm und 125 cm)
- 2 Federpakete (blau, weich)
- 1 Kugellager-Drehwirbel
- 3 Sicherheitskarabiner

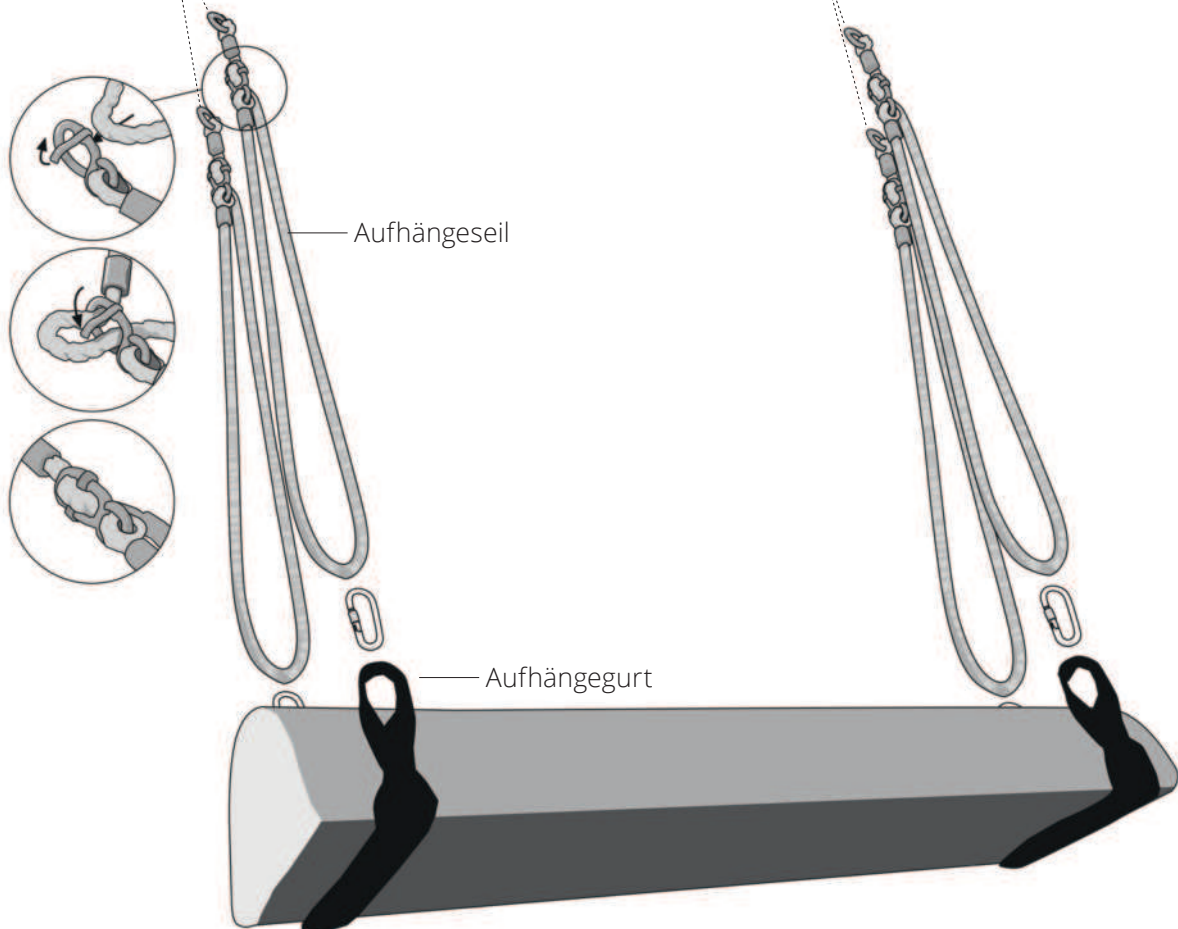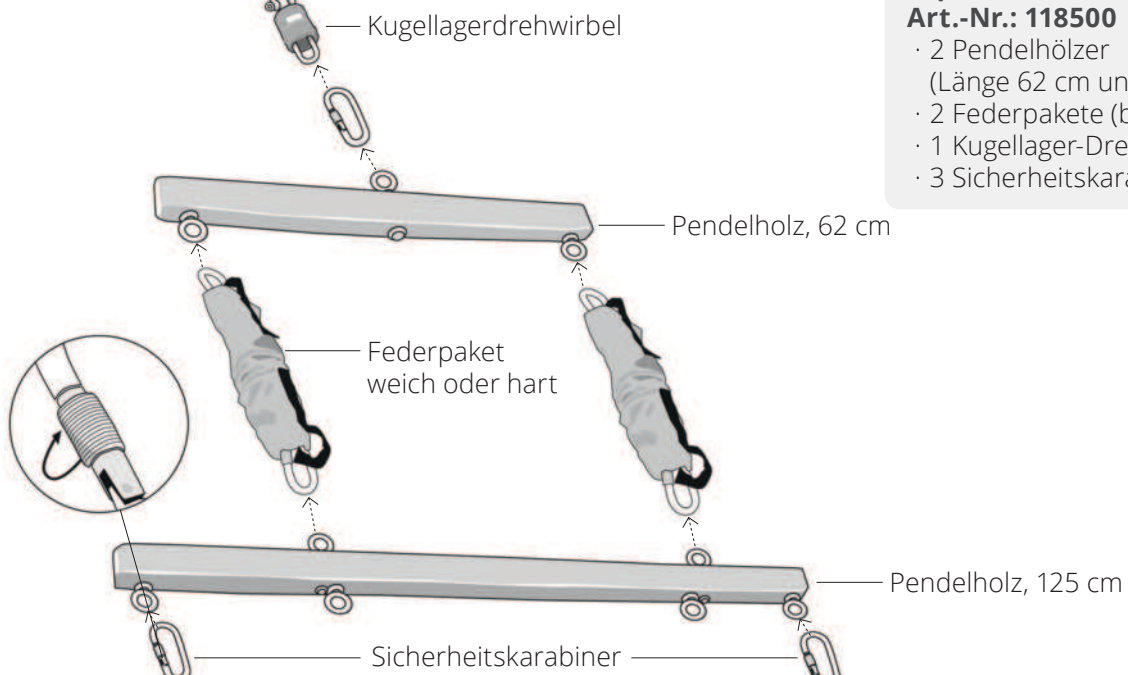

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers! Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

HerstellereinFORMATION

Halbrundschaukel

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 118000

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg
Größe	ca. 125 x 30 cm
Eigengewicht	ca. 6 kg
Material	Cordura, dunkelblau / rot Polypropylengurtband Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 4 Aufhängeseile (je 2 m), höhenverstellbar und 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Halbrundschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **zwei** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienensystem).

Beurteilungskriterien:

- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung
- zur intensiven Bewegungsfindung
- Förderung der Körperkoordination
- Stimulation der extraokularen Muskulatur u.v.m.
- Einsetzbar in Ergotherapie und Psychomotorik
- Für die Behandlung von Kindern und Erwachsenen

Pflege und Reinigung:



Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Wichtig:

Das Polster der Halbrundschaukel darf nur mit der gepolsterten, runden Fläche nach oben aufgehängt werden. Anderenfalls wird durch die extreme Beweglichkeit der Schaukel ein Ausreißen der Aufhängegurte begünstigt.

Anwendungsbeispiele

HAIDIG® Decken-T-Schienensystem mit 1-Punkt-Aufhängung

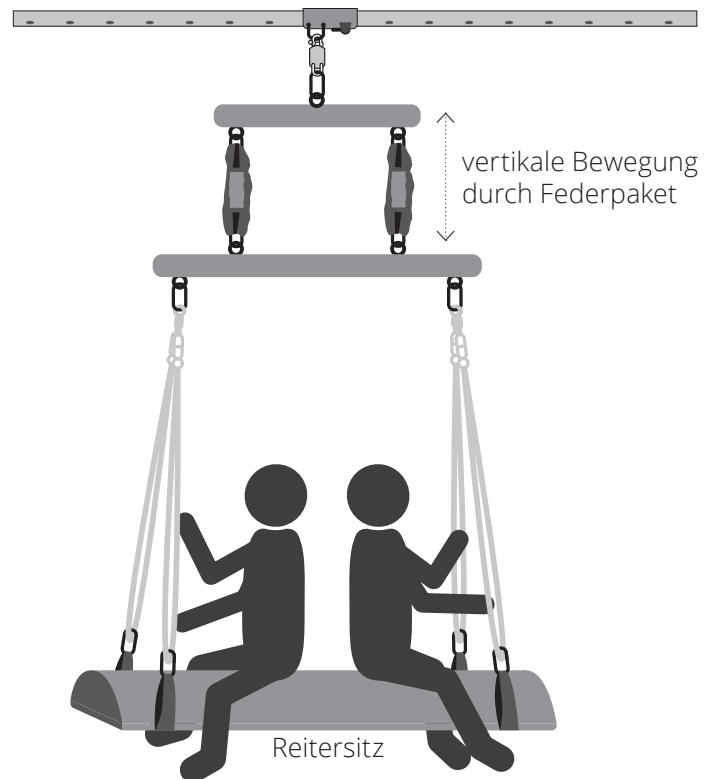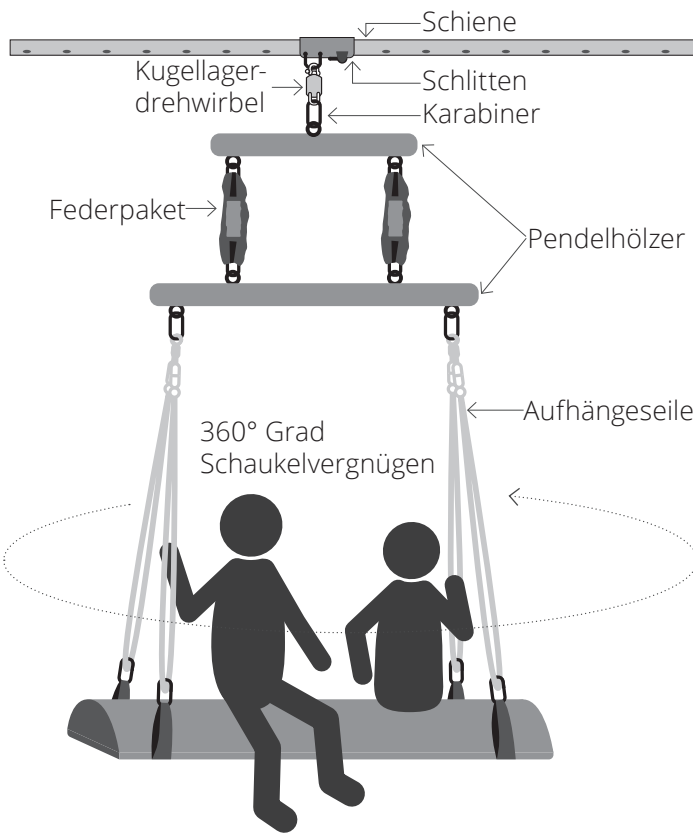

Unter Berücksichtigung der Maximallast, können auch mehrere Kinder die Schaukel gleichzeitig nutzen.



Als Bodenelement kann man die Halbrundschaudel als Hindernis oder als Brücke in einer Bewegungslandschaft verwenden. Mit der Rundung nach unten ergeben sich neue Gleichgewichtsübungen.

